

3HSmart

발마사지기

사용설명서



3H-2500

저주파 발 마사지기란?

발마사지기



Contents

저주파 발 마사지기란?	3
발반사구란?	4
발반사구의 위치	5
제품 구성	6
사용 방법	7
주의사항	9
품질보증서	11

저주파 발 마사지기

발마사지기는 전통 한의학 이론을 응용하여 발바닥 반사구 건강법 원리와 전기적 자극을 이용한 저주파 원리를 결합시켜 제조한 기기로, 인체에 알맞은 주파수와 파형을 적용하여, 근육경직을 풀어주어 근육통증을 완화시키는 기능을 하며, 저주파 패드는 저주파 전류를 체내에 주입시켜 자극을 가함으로써 통증을 완화 시킵니다.

발마사지기는 25가지 모드의 발마사지 기능과 전류의 세기를 체형에 알맞게 설정할 수 있도록 (01-99) 하였으며, 리모컨 기능이 추가되어 쉽게 이용하실 수 있게 만들어진 새로운 감각의 디자인을 강조한 제품입니다.



100-240V
50/60hz

발반사구란?

“발반사구”란 무엇인가?


우리의 발은 우리몸의 축소판이라고 할 수 있습니다. 우리몸에는 많은 반사구가 분포되어 있습니다. 특히 손과 발에 가장 많이 신경 반사구가 연결되어 있는데, 발 반사요법이란 바로 발에 분포된 신경 반사구에 자극을 주어 건강을 증진시킬 수 있는 자연 건강법입니다.

발은 제 2의 심장이라고 할 만큼 인간의 행동에 아주 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 그러나 대부분의 사람들은 발의 중요성을 인식하지 못하고 있으며, 오히려 불결하게 생각하기도 합니다. 과거에는 비포장 길을 걸었기 때문에 자연스럽게 발바닥 주위의 반사구를 자극 함으로써 건강한 생활을 영위할 수 있었습니다.

그러나 오늘날은 교통기관의 발달과 도로의 개선으로 발바닥이 받았던 반사구의 자극이 현저히 줄어들게 되었으며, 또한 음식문화의 발달로 필요 이상의 영양섭취가 오히려 체내의 노폐물과 독소를 발생시키는 원인이 되어 혈액순환의 장애로 많은 사람들이 질병을 얻게 되기도 합니다.

발 반사 요법이란 건강한 심신을 유지하기 위한 노력으로 발에 분포된 신경 반사구에 자극을 주어 각각의 신체의 장기를 원할 하게 활동하도록 도와주는 방법으로 이는 인간이 본래부터 가지고 있는 면역성을 키워 자연치유력을 되살릴 수 있는 민간요법입니다.

발반사구의 위치

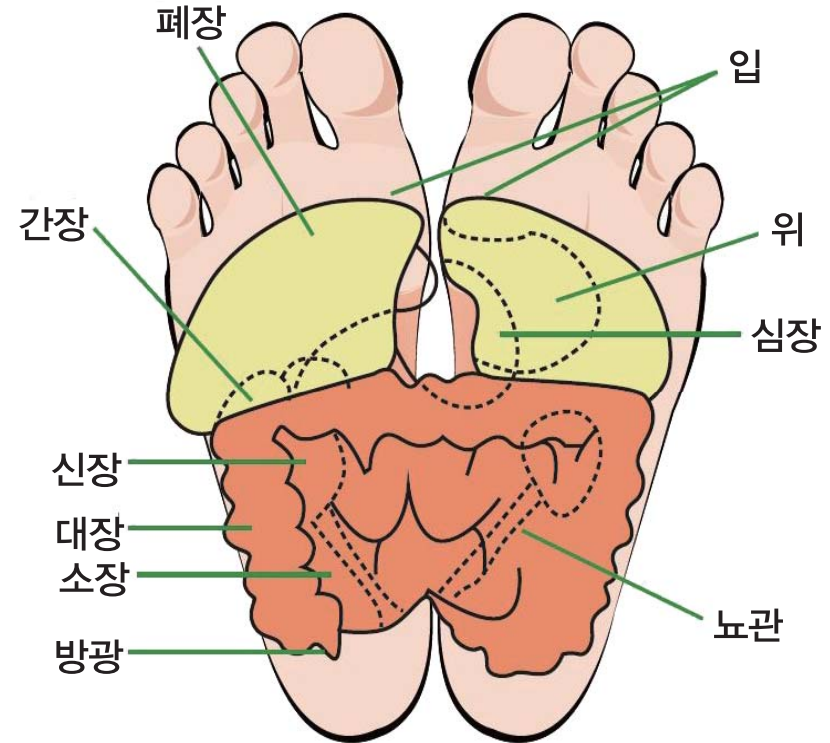

제품 구성

사용방법

제품 상자 안에는 다음과 같은 제품들이 들어 있습니다.



본체



리모컨



부항패드



설명서



아답터



전극선



포장박스




사용방법

- ① 아답터의 잭을 본체와 연결한 후 아답터를 콘센트에 연결하세요.
 - ② Power 스위치를 누르면 조작부 숫자가 "00"으로 켜집니다.
 - ③ 적외선(LED) 스위치를 누르면 발판에 적외선 불이 켜집니다.
 - ④ 사용하고자 하는 조작부의 "◀"와 "▶"스위치를 누르시어 원하는 사양을 선택합니다.
 - ⑤ "◀"UP, "▶" DOWN
 - ⑥ HEAT 스위치는 발판의 온열기능을 사용하지 않을시 작동하며 작동하지 않을 시 발판에 온열이 가동됩니다.
 - ⑦ 원하는 부위에 패드(척추/부항/손 봉)를 5~6cm 간격으로 두장을 붙이시고 "◀"와 "▶"를 이용하여 원하는 저주파세기를 조절하십시오.
- 저주파 세기는 (00~99)까지 조절됩니다.
- ⑧ 저주파의 모드는 "00"으로 자동모드 입니다.
 - 모드변경시 "◀"와 "▶"버튼을 이용하여 원하는 모드를 선택하세요.
 - ⑨ 리모컨 사용법도 위와 동일합니다.
 - (리모컨 뒷면은 전지를 교체할 수 있도록 되어 있습니다.)

주의사항

1. 본체는 가급적 평평한 바닥에서 사용하십시오.
2. 점착식 저주파 패드(척추/부항/손 봉)는 사용부위를 물수건 등으로 닦고 건조 후에 점착하는 것이 좋습니다.
3. 패드 전극코드와 패드(척추/부항/손 봉)는 자주 분리하지 않는 것이 좋습니다.
4. 전극코드는 심하게 꺾거나 잡아 당기지 마십시오.
5. 본체에서 전극코드를 뺄 때에는 플러그를 잡고 빼주십시오.
6. 전극코드가 끊겨 고장이 난 경우에는 별도 판매품을 구입해 주십시오.
7. 사용이 끝난 후에는 본체의 전원을 끄고, 콘센트에서 전원 아답터를 뽑아 주십시오.
8. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
9. 패드(척추/부항/손 봉)를 한쪽만 하면 작동을 하지 않습니다.
- 두 개를 모두 접촉해야 작동합니다.

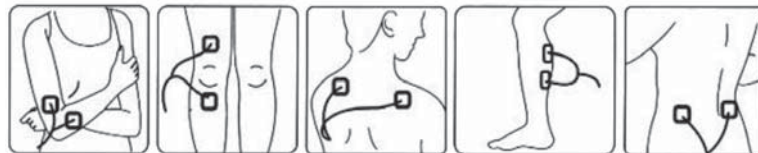

10. 온도, 습도가 높은 곳과 직사광선이 비추는 곳에 보관하지 마십시오.
11. 패드(척추/부항/손 봉)를 접촉할 때나 떼어낼 때는 반드시 전원을 끄고 사용하십시오.
12. 패드(척추/부항/손 봉)를 몸에서 떼어낼 때는 선을 잡아 당기지 말고 패드 자체를 잡고 떼어 내십시오
13. 패드(척추/부항/손 봉) 사용시 가장 약한 세기부터 사용 하십시오.
14. 상처가 있는 부위에는 절대로 사용하지 마십시오.
15. 점착력이 떨어지면 식염수 등으로 살짝 세척해 주십시오.
16. 애완동물에게는 절대로 사용하지 마십시오.
17. 제품의 표시사항을 잘 읽어 보시고 정격용량에 맞게 사용 하십시오

발의 건강은 물론 우리 신체 중 통증이 빈번히 일어나는 곳, 허리, 어깨, 팔목, 팔꿈치 등에 사용하면 더욱 좋습니다.

주의사항

아래와 같은 사람은 의사와 상담 후 사용하십시오.

1. 심장에 장애가 있는 사람
2. 임산부
3. 악성종양환자
4. 고열환자
5. 지각장애가 있는 사람
6. 사용부위의 피부가 이상이 있는 사람
7. 급성 질환자
8. 기타 의사의 진단에 의해 부적합하다고 인정되는 사람

의료용 전자기기를 사용하시는 분은 사용하지 마십시오.

1. 페이스 메이커와 같은 체내 삽입형 의료용 전자기기
 2. 인공심장과 같은 생명 유지형 의료용 전자기기
 3. 심전계와 같은 장착형의 의료용 전자기기
- ※ 의료용 전자기기의 고장이나 신체에 중대한 피해를 초래할 염려가 있습니다.

다음과 같은 분은 반드시 보호자와 함께 사용해 주십시오.

1. 아동이나 시각장애가 있는 분
2. 사용설명서의 내용을 이해 못하시는 분
3. 치매환자 및 의사표현이 적절하지 못하시는 분
4. 심장에 가깝게 머리, 얼굴, 피부질환 등에는 사용하지 마십시오.

아답터를 비틀거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.

젖은 손으로 아답터를 닦거나 뽐지 마십시오.

본체 위에 물이 들어있는 용기나 무거운 물체를 올리지 마십시오.

본체 위에 올라가서 서있지 마십시오.

품질보증서

발마사지기 (3H-2500)

보증기간	본체 구입일로부터 1년간	구입	년 월 일
고 객	주 소		
	이 름		
	전 화		
판 매 자	판매점		
	이 름		
	전 화		

1. 본 제품은 엄격한 시험결과를 거쳐 승인을 얻은 제품으로서 보증기간 이내에 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리하여 드리고, 수리가 불가능한 경우에는 제품을 교환하여 드립니다.
2. 품질보증기간 만료 후 또는 품질보증기간 중이라도 다음의 경우에는 유상으로 수리하여 드립니다.
 - (1) 보증기간이 경과 한 후 발생한 성능불량 및 고장
 - (2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
 - (3) 당사의 서비스센터가 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - (4) 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함
3. 소비자 상담실
080-575-3333 '인증번호 MSIP-REM-3H1-3H-2500'